

# OPTELEC Compact 10 HD/Speech

Elektronische Lupe in Tablet-Größe  
mit **Free Write-Funktion**





# OPTELEC Compact 10 HD/ OPTELEC Compact 10 HD Speech

Die einzigartige Kombination aus Lesen und Schreiben:

Über 90% der Lupen-Nutzer wünschen sich unter Vergrößerung schreiben zu können.

Der ausklappbare Kameraarm der Compact 10 HD bietet die einzigartige Free Write-Funktion.

Die große elektronische Lupe überzeugt außerdem mit einer 25,4 cm Bildschirmdiagonale.

Sie ist sehr handlich und leicht, bei gleichzeitig großer Darstellung der Betrachtungsobjekte.

Durch den stabilen, ausklappbaren Kameraarm lässt sich eine DIN A4-Seite vollständig darstellen. Als Vorlese-Version, Compact 10 HD Speech, werden zusätzlich Texte mit natürlicher Stimme in 30 Sprachen vorgelesen.

## **Komfortables Touchscreen-Menü**

Durch das übersichtliche und intuitive Touchscreen-Menü mit 25,4 cm Bilddiagonale lässt sich schnell eine der 30 Landesprachen auswählen sowie Lesefarben, Bluetooth-Funktionen, Bildspeicherfunktionen und vieles mehr einstellen.

## **Schnelle Einsatzzeit**

Die Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech ist sofort nach dem Einschalten betriebsbereit.







# Free Write-Funktion:

## **Einzigartig dank ausklappbarem Kameraarm**

Compact 10 HD/Compact 10 HD Speech ist die ideale Lösung zum Vergrößern, Lesen und Schreiben.

**Das Besondere:** Unter dem Kameraarm können sehr übersichtlich Dokumente unterschrieben werden oder Kreuzworträtsel ausgefüllt werden.

## **Maximaler Komfort mit drei Kameras**

Die Lesekamera stellt unter dem Gerät liegende Dokumente dar, die Objektkamera weiter entfernte Fahrpläne oder Tafelbilder, die sie abfotografieren und vergrößern kann. Die Kamera im ausklappbaren Arm kann eine DIN A4-Seite vollständig erfassen.

## **Nützliche Vorlesefunktion**

Die Compact 10 HD als Speech-Version kann in 30 Sprachen vorlesen. Die praktische, fühlbare blaue Markierung am Leseständer zeigt die genaue Positionierung des Leseguts an, von der, nach einem Schnappschuss, der Text mit natürlicher Stimme über den eingebauten Lautsprecher oder über den Kopfhöreranschluss mit 3,5 mm-Buchse oder Bluetooth (ab V4.0) vorgelesen wird.







# Lesen und Schreiben in Kombination

## Funktionalität

- Großer 24,4 cm HD-Touch-Bildschirm
- Stufenlose, bis zu 22-fache Vergrößerung
- Innovativer Kameraarm für bequeme Schreibfunktion
- Intuitive Touchscreen-Menüführung mit klar lesbaren Funktionssymbolen
- Aufklappbarer Leseständer mit Positionsmarkierung für Lesegut
- Schnappschussfunktion
- Vorlesefunktion in 30 Sprachen (Speech-Version)
- Miracast-Drahtlosverbindung
- Geringes Gewicht
- Leicht zu findende Steckerbuchse
- 2 Produktausführungen: mit oder ohne Vorlesefunktion

## Design


- Kompaktes Tablet-Format
- Matt-schwarze Gehäusefront
- Pflegeleichte Oberfläche aus widerstandsfähigem Kunststoff
- Optische Absetzung des Kameraarms aus Aluminium
- Farblich akzentuierter An-/Ausschalter
- Edle Transporttasche mit Magnetverschluss

## Technik

- 3 HD Autofokus-Kameras (Lese-, Objekt- und Ganzseitenkamera)
- 16 verschiedene Darstellungsmodi
- Schnelle Texterkennung
- Praktischer Schnappschuss-Speicher für ca. 500 Bilder
- Vorlesefunktion in natürlicher Stimme (Speech-Version)
- Stromsparende Abschaltautomatik
- Bequeme Bluetooth-Funktion
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku



3 Kameras, jeweils mit LED-Beleuchtung

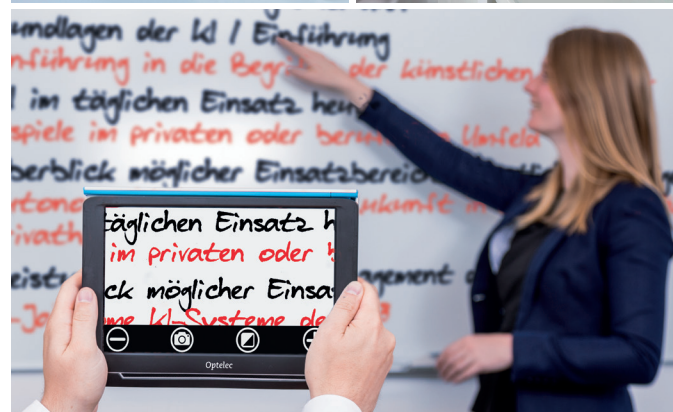

# Technische Daten

## OPTELEC Compact 10 HD Speech

Compact 10 HD Speech vereint 2 Geräte in einem:  
Große elektronische Lupe in Tablet-Größe und Vorlesegerät.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| ■ Art.-Nr.                          | 511002   |
| ■ Vergrößerung                      | 0,5- bis 22-fach   |
| ■ Monitor                           | Touchscreen-Bildschirm<br>Bildschirmdiagonale: ca. 25,4 cm (10")<br>Auflösung: 1.280 x 800 Pixel<br>Kontrast: 800:1, Helligkeit: 450cd/qm  |
| ■ Kamera                            | 3 x HD Autofokus, je 13 MP   |
| ■ Größe                             | Größe (BxHxT)<br>ca. 26,2 x 18,7 x 3,2 cm  |
| ■ Gewicht                           | 915 g  |
| ■ Darstellmodi                      | 16 Farbkombinationen: Echtfarben,<br>Schwarz auf Weiß, Weiß auf Schwarz,<br>Gelb auf Blau + 12 zusätzliche   |
| ■ Texterkennung,<br>Vorlesefunktion | Texte in über 30 Landessprachen<br>durch eingebauten Lautsprecher;<br>Kopfhöreranschluss über 3,5 mm-Buchse<br>oder Bluetooth (ab V4.0)  |
| ■ Stromversorgung                   | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku<br>Akkulaufzeit: ca. 3,5 Stunden<br>Ladezeit: ca. 4,5 Stunden   |
| ■ Extras                            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufklappbarer Leseständer</li><li>- Abschaltbare LED-Beleuchtung</li><li>- Schnappschussfunktion mit anschließender Vergrößerung und Bildverschiebung (Scrollfunktion), Speicherung und Vorlesefunktion</li><li>- Leselinie</li><li>- Abschaltautomatik (Zeit wählbar)</li><li>- Uhrzeitfunktion</li><li>- Live-Bild und Sprache auf den Fernseher übertragbar per Miracast-Drahtlosverbindung</li><li>- Batteriestatusanzeige</li></ul> |
| ■ Zubehör                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutztasche</li><li>- Netzteil mit USB-C-Kabel</li><li>- Kopfhörer-Adapter</li><li>- Reinigungstuch</li><li>- Bedienungsanleitung</li></ul>   |

## OPTELEC Compact 10 HD

Compact 10 HD bietet vergrößertes Lesen und Schreiben  
in Tablet-Größe.

|                   |   |
|-------------------|---|
| ■ Art.-Nr.        | 511012  |
| ■ Vergrößerung    | 0,5- bis 22-fach  |
| ■ Monitor         | Touchscreen-Bildschirm<br>Bildschirmdiagonale: ca. 25,4 cm (10")<br>Auflösung: 1.280 x 800 Pixel<br>Kontrast: 800:1, Helligkeit: 450cd/qm   |
| ■ Kamera          | 3 x HD Autofokus, je 13 MP  |
| ■ Größe           | Größe (BxHxT)<br>ca. 26,2 x 18,7 x 3,2 cm   |
| ■ Gewicht         | 915 g   |
| ■ Darstellmodi    | 16 Farbkombinationen: Echtfarben,<br>Schwarz auf Weiß, Weiß auf Schwarz,<br>Gelb auf Blau + 12 zusätzliche  |
| ■ Stromversorgung | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku<br>Akkulaufzeit: ca. 3,5 Stunden<br>Ladezeit: ca. 4,5 Stunden  |
| ■ Extras          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufklappbarer Leseständer</li><li>- Abschaltbare LED-Beleuchtung</li><li>- Schnappschussfunktion mit anschließender Vergrößerung und Bildverschiebung (Scrollfunktion) und Speicherung</li><li>- Leselinie</li><li>- Abschaltautomatik (Zeit wählbar)</li><li>- Uhrzeitfunktion</li><li>- Live-Bild auf den Fernseher übertragbar per Miracast-Drahtlosverbindung</li><li>- Batteriestatusanzeige</li></ul> |
| ■ Zubehör         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Schutztasche</li><li>- Netzteil mit USB-C-Kabel</li><li>- Reinigungstuch</li><li>- Bedienungsanleitung</li></ul>  |

20-043/370638/00